

ADATTO™

Больничная кровать

Удобство и комфорт

ОБЩАЯ ПАЛАТА



Новая удобная больничная кровать Adatto для ухода за пациентами

Разработанная компанией Merivaara новая больничная кровать Adatto — это экономичное долговременное решение, которое соответствует всем требованиям современного ухода за пациентами. Кровать удобна как для медицинского персонала, так и для пациентов.

- Экономичность
- Эргономичность
- Удобство использования



Благодаря своей эргономичности больничная кровать Adatto существенно упрощает работу медицинского персонала. Широкий диапазон регулировок высоты и возможность выбора различных положений позволяют предоставить пациенту максимально качественный уход.

Легковесная конструкция и направляющее колесо упрощают перемещение кровати.

Четырехсекционное матрасное основание со сдвигающейся спинной секцией при подъеме

предотвращает смещение пациента и повышает уровень его комфорта.

Кроме того, с помощью пульта пациенты могут самостоятельно отрегулировать высоту, чтобы им легче было вставать с кровати и обратно ложиться на нее. Для повышения безопасности пациентов медперсонал может заблокировать пульт ручного управления (дополнительная функция).

Кровать Adatto соответствует требованиям новых международных стандартов МЭК в отношении кроватей с электрическими регулировками (IEC 60601-2-52).

Особенности

- Четырехсекционное матрасное основание со сдвигающейся спинной секцией при подъеме для превосходной эргономики.
- Перфорированная поверхность изготовлена из прочного, безопасного для окружающей среды ABS-пластика.
- Полностью электрическое управление высотой, спинной и ножной секциями.
- Прочная и устойчивая конструкция для длительного использования.
- Отличное соотношение «цена – качество», экономичность технического обслуживания.
- Безопасная рабочая нагрузка 250 кг.



Для перехода в положение Тренделенбурга и быстрого опускания спинной секции предусмотрены пневматические пружины. Это обеспечивает дополнительную безопасность эксплуатации кровати.



В модели Adatto также предусмотрена возможность ручной регулировки положения голеней.



Отрегулировать высоту, спинную и ножную секции ручного управления. Можно с помощью простого в использовании пульта. В случае необходимости электрические регулировки можно заблокировать (опционально).



Четырехсекционное матрасное основание позволяет выбрать различные положения, что очень важно для хорошего самочувствия пациента. Сдвигающаяся спинная секция при подъеме предотвращает смещение пациента.



В случае необходимости положения Тренделенбурга и Антитренделенбурга можно отрегулировать вручную.

Дополнительные принадлежности



Стойка для переливания к устройству для приподнятия
100000713



Инфузионная стойка
2 крючка 100005780
4 крючка 100000499



Устройство для приподнятия больного
A42245400



Рукоятка-клюка
A41842500



Держатель мочеприемного мешка (бутылки)
128009790



Корзина для истории болезни
128009784



Стеллаж для мониторов и журналов
128009768



Лампа для чтения 12 В/10 Вт со специальным креплением к каталке и кровати
100000498



Резервный аккумулятор
A42826400



Держатель мочеприемного мешка
100000799



Пульт ручного управления с встроенной функцией блокировки
A42826500

Технические характеристики

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

Матрасное основание	4-секционное с возможностью увеличения длины
Вес, кг	105 кг
Безопасная рабочая нагрузка	250 кг
Максимальный вес пациента	180 кг
Длина с бамперами	2180 мм
Ширина матрасного основания	800 мм
Регулировка высоты	390 мм – 840 мм
Регулировка спинной секции	0° – +71°
Регулировка ножной секции	-14° – +33°
Регулировка в положении Тренделенбурга	13°
Антитренделенбург	4°
Колеса с системой центрального тормоза и направляющее колесо	150 мм

Регулировки


Высота кровати и спинная секция	Электрическая
Ножная секция	Электрическая
Секция голени	Ручная
Положение Тренделенбурга и быстрое опускание	Ручное (с помощью пневматических пружин)

Решения для обеспечения оптимального потока пациентов

Merivaara – расположенная в Финляндии глобально функционирующая компания, производящая широкий диапазон больничной мебели, как, например: операционные столы, каталки для перемещения пациентов, столы для дневной хирургии, акушерские кресла-кровати, столы для осмотра, функциональные кровати и мебель для кабинетов и палат. В ассортименте также медицинские светильники для смотровых и операционных залов. Наши разнообразные решения способствуют обеспечению грамотного и экономически эффективного движения пациентов во всех отделениях современной клиники.

Будучи основанной в 1901 году, за более, чем 100-летнюю историю, Merivaara накопила богатейший опыт конструирования и производства медицинской мебели и оборудования. Удобство, надежность и функциональность наших изделий по праву оценена нашими заказчиками более, чем в 100 странах мира.

Вся продукция имеет маркировку CE. Система качества Merivaara построена согласно Европейской директиве на медицинские изделия и сертифицирована согласно требованиям стандартов качества производства ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003. Система защиты окружающей среды при производстве продукции сертифицирована согласно стандарту ISO 14001:2004.

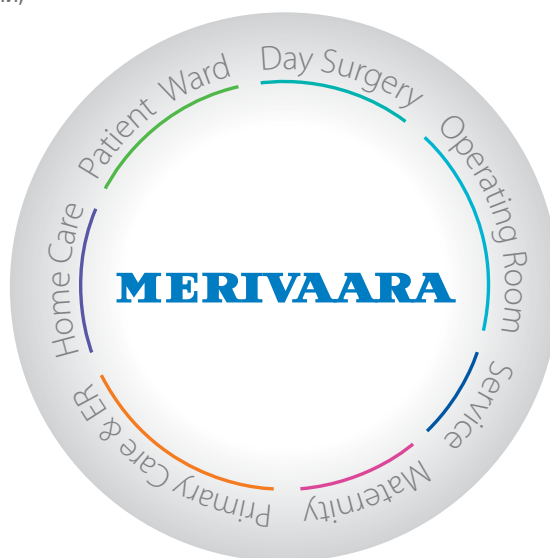

Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 Lahti, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ)
Тел.: +358 3 3394 611, факс: +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com

Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, действительна на момент публикации. Составляя брошюру со всей тщательностью, Merivaara не несет ответственности за возможные в ней ошибки и неточности, и оставляет за собой право вносить изменения без уведомления. Merivaara Corp. оставляет за собой право изменять модели и вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления. Пожалуйста, обратитесь к сайту Merivaara за новейшей информацией.

Все торговые марки – собственность Merivaara, пока не установлено иное. Патенты получены или ожидаются.

© Merivaara Corp. 6046RU 062013, отпечатано в markprint 42684

